




HealthTech

## Inteligentný masážny prístroj na krk Hi5 K3

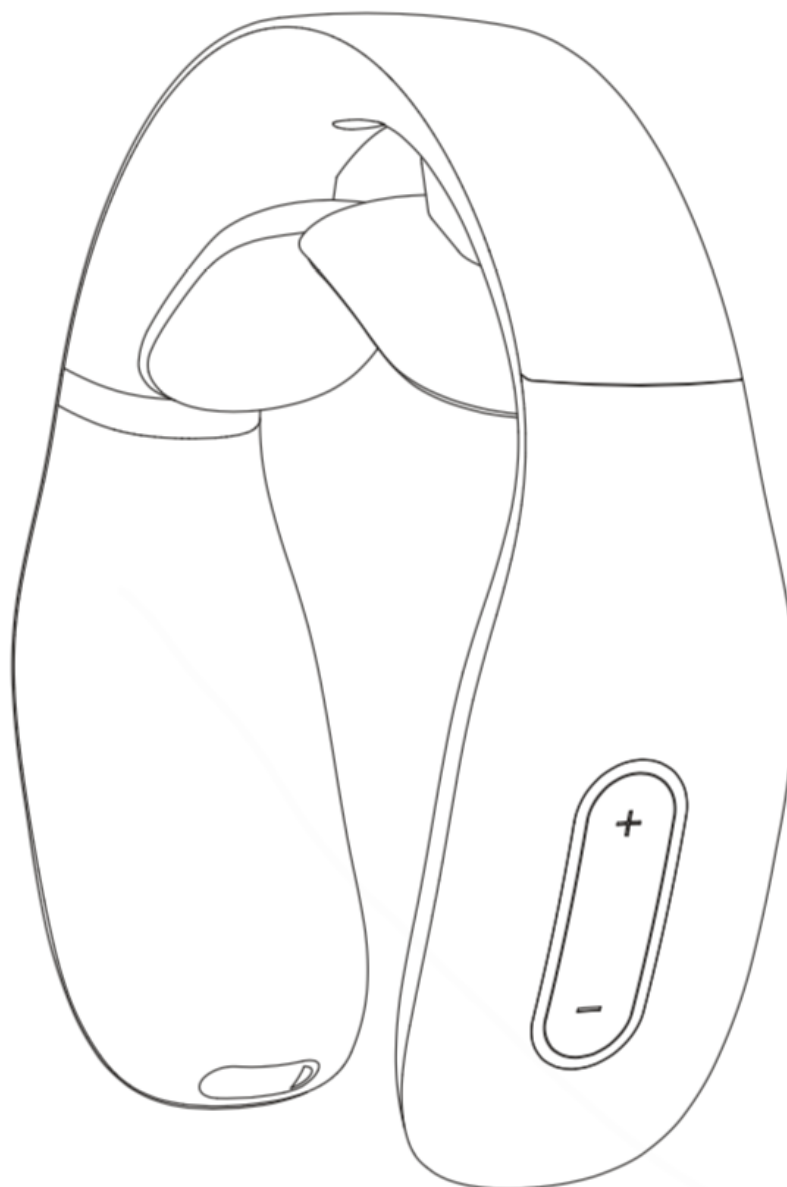

Predajca: REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.

IČO: 50699431, DIČ: 2120430026, IČ DPH: SK2120430026

**Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Oboznámte sa s ním pred používaním masážneho prístroja. Návod si odložte pre prípadných ďalších používateľov masážneho zariadenia.**

**Nebezpečenstvo:**

Nepoužívajte výrobok s najsledujúcimi elektronickými zariadeniami:

1. Medicínske elektronické zariadenie implantované do ľudského tela, napr. kardiostimulátory.
2. Život udržiavajúce medicínske elektronické zariadenia, ako umelé srdce a pľúca.
3. Medicínske elektronické zariadenie, ako elektrokardiograf.
4. Výrobok môže zapríčiniť, že tieto medicínske zariadenia budú mať poruchu alebo skrátenú životnosť.

**Upozornenie:**

Ak pacient používa vysoko frekvenčné chirurgické zariadenie s výrobkom v rovnakom čase, elektronická podložka môže spôsobiť popáleniny a výrobok sa môže poškodiť. Ak je výrobok používaný blízko krátkovlnného, alebo mikrovlnného terapeutického zariadenia (do 1m) výstup produktu môže byť nestabilný.

Elektronické podložky nedávajte na miesta kde sa nachádzajú jazvy a poranenia počas masáže. Počas masáže elektronické podložky nemôžu byť umiestnené blízko hrudníka a srdca, inak to zapríčini riziko kardiofibrilácie.

Výrobok je určený pre jedného užívateľa. Pre používanie viacerými osobami prosím očistite elektrické podložky na výrobku pred použitím.

Keď používate výrobok, elektrické podložky by mali byť tesne priliehajúce na pokožku a v rovnomernom kontakte.

Elektrické podložky tohto výrobku majú ohrevnú funkciu a používaním funkcie horúcej kompresie dlhší čas (nad 15minút) na rovnakom mieste zapríčini popáleniny pri nízkych teplotách.

Ak sa cítite zle počas alebo po používaní výrobku, prestaňte výrobok používať a konzultujte problémy s lekárom. Tento výrobok obsahuje lítijové batérie.

Prosím, neopravujte, nerozoberajte a neupravujte výrobok. Inak výrobok môže byť poškodený a môže explodovať.

**V nasledujúcich prípadoch, prosím konzultujte so svojim lekárom používanie výrobku, nakoľko môže nastať zhoršenie zdravotného stavu alebo nepohodlie:**

1. Pacienti, ktorí sú liečení lekárom a cítia abnormality
2. Pacienti s abnormalitou srdca a mozgových nervov
3. Pacienti, ktorých telesná teplota presahuje 38°C (horúčkové obdobie)
4. Pacienti s infekčnými chorobami
5. Pacienti s poruchou citlivosti kože alebo s kožnými abnormalitami
6. Pacienti, ktorí berú lieky
7. Pacienti s abnormálnym krvným tlakom
8. Pacienti, ktorí sa nemôžu slobodne vyjadrovať
9. Pacienti, ktorí trpia zmyslovými poruchami v dôsledku cukrovky a ďalšími poruchami periférnej cirkulácie na vysokej úrovni
10. Pacienti, ktorých koža je alergická na elektródy z nehrdzavejúcej ocele

### **Výrobok je zakázaný používať v nasledovných situáciách:**

1. Pacienti so zhubnými nádormi
2. Pacienti s tendenciou ku krvácaniu
3. Tehotné ženy a novonarodené deti
4. Pacienti s hnisavým zápalom
5. Užívatelia kardiostimulátora
6. Pacienti s kovovým implantátom

**Nepoužívajte výrobok** blízko srdca, na hlavu, tvár, genitálie alebo tiež pacienti, ktorí majú problém s kožou. Počas terapie nestláčajte vnútorné orgány ani rukou ani výrobkom. Inak môžu nastať zdravotné ťažkosti alebo psychický diskomfort. Nepoužívajte 2 sety tohto výrobku v rovnakom čase, ani iné medicínske zariadenie, inak to môže spôsobiť nevoľnosť alebo psychický diskomfort. Tento výrobok môže byť používaný iba na masáže. Nepoužívajte elektródy s poškriabaným alebo poškodeným povrchom alebo nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok bez autorizačného výrobcu. Inak to môže spôsobiť poruchu alebo elektrický šok.

### **Záznamy:**

#### **Výstraha:**

Výrobok prestaňte používať ak cítite nepohodlie zapríčinené s abnormalitou produktu. Prosím konzultujte to so svojim lekárom, ak sa vyskytne diskomfort na vašej koži. Ak pri automasáži alebo pri masáži iného človeka chcete pohnúť s elektrickými podložkami na výrobku, prosím uistite sa, že výrobok je vyprnutý, inak daná osoba môže dostať elektrický šok.

Počas masáže nemajte nasadené iné elektrické zariadenie, ako sú napr. elektrické hodinky, inak môže byť výrobok alebo iné zariadenie poškodené.

Ak výrobok nefunguje správne, prosím vypnite ho, inak môže nastať zvýšenie teploty, skrat alebo výbuch. Čo najskôr kontaktujte predajcu a informujte ho o danom probléme.

Deti alebo ľudia, ktorí nie sú mentálne v poriadku, nemajú povolenie zariadenie používať. V prípade, že takýto ľudia budú zariadenie používať, môže prísť k nehode.

Nepoužívajte výrobok ak ste na mieste kde je vysoká teplota alebo vlhkosť, pretože môže nastať nehoda alebo poškodenie výrobku.

Nepoužívajte výrobok počas spánku, pretože sa môže výrobok poškodiť alebo sa môže počas spánku premiestniť na časť tela, kde je zakázané používať výrobok. Takéto konanie môže spôsobiť zranenie a zdravotné problémy.

Nepožívajte tento výrobok počas šoférovania, môžu vzniknúť zdravotné problémy, ktoré môžu viesť k dopravnej nehode.

Neprikladajte elektródové podložky na postihnuté miesta na dlhšiu dobu, pretože to môže zapríčiniť zápal kože.

V procese masáže nie je povolené prikladať iné kovové predmety k elektrodoým podložkám, ako sú napr. retiazka, naušnice.... Inak môže prísť k silnému elektrickému šoku.

Nepoužívajte výrobok na jednom mieste dlhú dobu (viac ako 30minút), inak to môže spôsobiť únavu masírovanej časti tela alebo zdravotné problémy.

Prosím, nasadte si tento výrobok správnym spôsobom pre krčnú chrbticu a noste výrobok symetricky, inak môže prísť k nehode alebo k iným zdravotným problémom.

Prosím namiesto ťahania za kábel, držte zástrčku kábla a vytiahnite ho, inak to môže zapríčiniť elektrický skrat, ktorý môže poškodiť výrobok, keď odpojete napájací kábel USB zo zariadenia.

Elektrické podložky výrobku majú povrchovnú ohrevnú funkciu. Užívateľ, ktorý nie je senzitívny na teplo alebo má vyššiu telesnú teplotu ako je normálna, by mal používanie výrobku konzultovať s doktorom. Je normálne, že teplota povrchu podložiek stúpne pri dlhšom používaní.

### **Rady:**

Prosím uistíte sa, že pred použitím sú funkčné všetky tlačidlá. Pokiaľ sa bude výrobok používať prvýkrát alebo ak zariadenie nebolo používané dlhší čas prosím pri nabíjaní postupujte podľa návodu, aby ste zaistili že bude fungovať normálne. Pokiaľ likvidujete tento výrobok, prosím postupujte podľa miestnych predpisov, pre životné prostredie a likvidáciu elektroodpadu.

Zariadenie odovzdajte na miesto, kde sa zbiera elektroodpad. Zariadenie je určené pre osoby od 16 rokov a staršie.

Nepoužívajte alebo nepredávajte tento výrobok na nasledujúcich miestach: miesta vystavené priamemu slnku, miesta s vysokou teplotou a vlhkosťou, na miestach s vodou, miesta kde je vysoká prašnosť.

Je odporúčané používať výrobok 2-3x denne (naprogramovaný pracovný čas jedného cyklu je 15minút). Ďalej sa výrobok neodporúča používať viackrát za sebou.

Pre zlepšenie výkonu si môžete jemne navlchčiť pokožku čistou vodou. Prípadne môže zaniknúť jemné pichanie v ojedinelých prípadoch.

### **Poznámka:**


1. pri používaní výrobku prosím sedte rovno a nehmírite sa alebo nehýbte vašou hlavou
2. Po nasadení výrobku zapnite výrobok a vyberte si vhodnú úroveň pre vaše potreby
3. Pokiaľ výrobok je v činnosti a dotknete sa elektrických podložiek prstami v rovnakom čase môže zvyknúť nepohodlie
4. Prosím pred použitím strhnite z výrobku ochranný film (priesvitné fólie).

**! Ak sa cítite zle alebo cítite psychickú alebo fyzickú abnormalitu počas používania, prosím prestaňte výrobok okamžite používať a odstráňte výrobok z tela.**

## Predstavenie výrobku


### Vlastnosti produktu:

1. Toto zariadenie je založené na ergonomickom, estetickom a módnom dizajne, ktoré dokonale ladí s krivkou krku
2. Vďaka zabudovanej batérii je výrobok prenosný a jednoducho použiteľný
3. 4 druhy masážnym technik, 16 úrovní masážnej intenzity, robí výrobok vhodný pre všetky typy ľudí

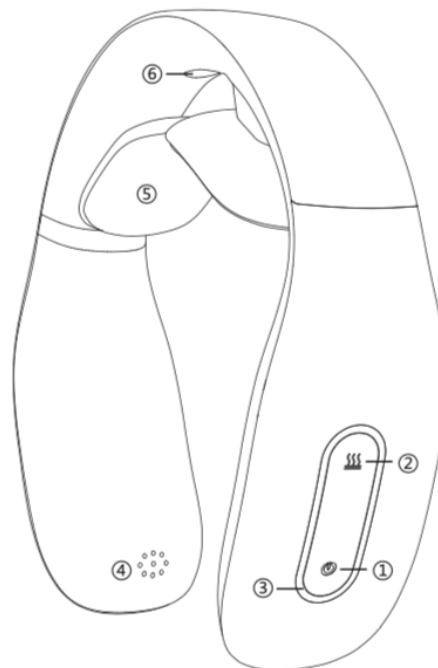

### Popis častí výrobku:

1. Vypínač/Zapínač
2. Nastavenie ohrevu
3. Nabíjací indikátor
4. Reprodukotor
5. Elektródové podložky
6. Infračervené svetlo
7. Zvýšenie pulzu
8. Zníženie pulzu
9. Nabíjací port
10. Led lampa s atmosférou

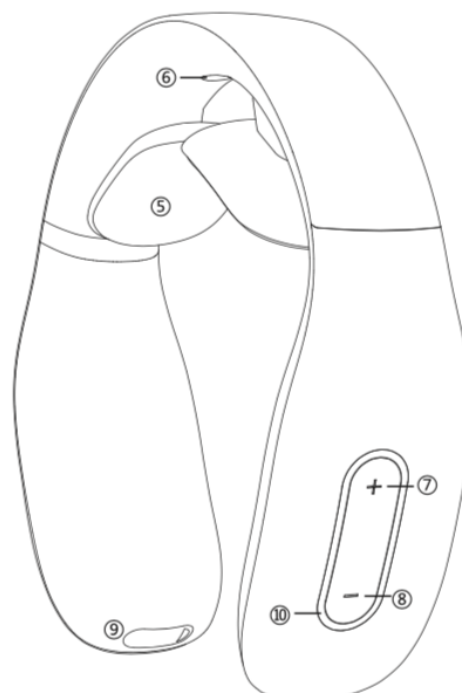

## Spôsob použitia

### Obsluha:

1. Zapnutie: dlhé zatlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia pre spustenie zariadenia, potom sa spustí automatický kombinovaný režim a led svetlá budú svietiť na oboch koncoch.
2. Vypnutie: dlhé zatlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia pre vypnutie zariadenia. Vypnutie je sprevádzané zvukovými signálmi.
3. V zapnutom stave, krátke stlačenie tlačidla nastavenia ohrevu pre zapnutie ohrevu od nízkej úrovne. Spustenie ohrevu je sprevádzané zvukovými signálmi.
4. Krátkym zatlačením tlačidla nastavenia ohrevu zvyšujete intenzitu ohrevu až po najvyššiu úroveň, je to sprevádzané zvukovými signálmi.
5. Počas vysokého stupňa ohrevu, krátkym stlačením tlačidla nastavenia ohrevu vypnete ohrev na zariadení, je to sprevádzané zvukovými signálmi.
6. Základné nastavenie je masážny režim 1 - automatická kombinácia režimu, nízka teplota a intenzita elektrických pulzov na úrovni 1
7. V zapnutom stave, krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia pre prepnutie masážneho režimu, je to sprevádzané zvukovými signálmi. Keď prepínate režim intenzita pulzov sa nemení.
  - Pokiaľ je v chode režim 1 (automatická kombinovaná masáž), krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vstúpite do režimu 2
  - Pokiaľ je v chode režim 2 (túkanie), krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vstúpite do režimu 3
  - Pokiaľ je v chode režim 3 (škrabanie), krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vstúpite do režimu 4
  - Pokiaľ je v chode režim 4 (miesenie), krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa vrátite do režimu 1
8.
  - Krátkym stlačením tlačidla “+” zvýšite intenzitu pulzov. Pulzy nastavujete od 0-16, nastavovanie pulzov je sprevádzané zvukovými signálmi.
  - Krátkym stlačením tlačidla “-“ znížujete intenzitu pulzov alebo zastavíte pulzy. Pulzy nastavujete od 0-16, nastavovanie pulzov je sprevádzané zvukovými signálmi.
9.
  - Ak pokračujete s krátkym stláčaním tlačidla “+” , pri dosiahnutí stupňa 16 sa ozvú zvukové signály.
  - Ak pokračujete s krátkym stláčaním tlačidla “-” , pri dosiahnutí stupňa 0 sa ozvú zvukové signály.
10. Infračervené svetlo bude zapnuté predvolene, pokiaľ je zariadenie zapnuté.
11. Po zapnutí sa zariadenie automaticky vypne po 15-tich minútach.
12. Pokiaľ napätie baterky je 3.25V a zariadenie je zapnuté, biele svetlo bude rýchlo blikať, čo naznačuje nedostatok el.energie. Ak napätie batérie je nižšie ako 3.25V zariadenie bude automaticky vypnuté. Prosím pripojte zariadenie k nabíjaniu. Nabíjanie pre plné nabitú baterku trvá asi 1,5hodiny.
13. Aby sa ušetrila energia, ak sa zariadenie nepoužíva 2minúty v zapnutom stave a elektrické podložky sa nedotýkajú kože, zariadenie automaticky spustí funkciu vypnutia.
14. **Pred prvým použitím nezabudnite s elektrických podložiek odstrániť priesvitnú fóliu. Inak je účinok elektród nízky.**

**Nabíjanie výrobku:**

1. Prosím použite adaptér 5V. Zapojte USB koniec nabíjacieho káblu, ktorý sa dodáva so zariadením, do adaptéru a druhý koniec USB-C nabíjacieho kábla zapojte do nabíjacieho portu na zariadení, následne svetelná signalizácia zobrazí stav nabíjania. Pomalé blikanie bieleho svetla indikuje, že zariadenie sa nabíja. Stále svietenie bieleho svetla indikuje, že zariadenie je nabité.
2. Prosím skúste použiť USB 5V, 1A alebo menej ako 2A adaptér k nabitiu zariadenia.
3. Zariadenia nemôže byť používané počas nabíjania.

**Technické parametre:**

Názov výrobku	Inteligentný krčný masér	Vstupné napätie	USB 5V
Označenie výrobku	K3	Menovitý výkon	2W
Ohrevná najvyššia teplota	42±3°C	Váha výrobku	130,5g
Ohrevná najnižšia teplota	38±3°C		

**Denná údržba:**

Pred čistením a údržbou zariadenia prosím vypnite zariadenie a použite vlhký papier pre čistenie elektrických podložiek. Keď je zariadenie obzvlášť špinavé, utrite a dezinfikujte s malým množstvom alkoholu (75% koncentrát).

**Záruka:**

1. Výrobok má záruku 2 roky od zakúpenia výrobku.
2. Záruka sa vzťahuje pri poškodení výrobku pri bežnom používaní.

**Záruka sa nevzťahuje na:**

1. Poškodenie pri preprave, nehode a páde
2. Pokiaľ je zariadenie opravované v neautorizovanom servise
3. Pri nesprávnom používaní zariadenia
4. Pokiaľ zariadenie nie je skladované a používané vo vhodnom prostredí a vhodných podmienkach
5. Pokiaľ je zariadenie používané nepoučenými užívateľmi a osobami, ktoré majú zakázané používať výrobok (deti, mentálne nespôsobilé osoby)

Predajca: REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.  
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026,  
IČ DPH: SK2120430026

