



HealthTech

Hi5 Shell Elektrický masážny prístroj na nohy



Ďakujeme Vám za zakúpenie elektrického masážneho prístroja na nohy.

Toto zariadenie je primárne určené na relaxáciu nôh, fyzickú terapiu a na uvoľnenie tlaku. Prístroj Vám poskytne masáž chodidiel s tepelným ohrevom, kompresnými vankúšmi a shiatsu masážou, vďaka čomu sa budú Vaše nohy cítiť pohodlne a uvoľnene. Rôzna intenzita sily masáže a nastavenie režimov sú dôležité pre spokojnosť rôznych užívateľov prístroja pri ich starostlivosti o chodidlá. 15 minút denne pomôže uvoľniť únavu, podporiť cirkuláciu krvi a prinesie zdravie a pohodlie.

Prečítajte si tento návod dôkladne a dodržiujte bezpečnostné usmernenia v návode.

Konfigurácia



Konštrukcia

1. predná časť povrchu: štyri nezávislé tlačidlá na kontrolovanie funkcií a nastavenia.
2. centrálna časť masážnej podložky: Shaitsu masáž na klenby s funkciou zahrievania.
3. predná časť masážnej podložky: valčeková masáž prednej časti chodidla.
4. zadná časť masážnej podložky: masáž stláčaním a miesením na päťach.
5. vnútorné vzduchové vankúše na priehlavky chodidiel.
6. vyberateľné a umývateľné látkové vnútro, ľahko čistiteľný prístroj.
7. spodok masážnej podložky je vybavený jednoduchou možnosťou skladovania elektrického napájania.

Parametre

Názov produktu: Hi5 Shell Electric Foot Massager

Rozmery produktu: 420x340x230mm

Menovité napätie: 100-240V

Menovitá frekvencia: 50-60HZ


Menovitý výkon: 45W

Inteligentný časovač: 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min.

Vlastnosti zariadenia

- Prístroj je navrhnutý v tvare vajíčka, je štýlový a pekný, ľahký a prenosný.
- Multifunkčné zariadenie z masážnymi funkciami pre chodidlá: valčeková, shiatsu, vzduchová tlaková masáž a ohrev chodidiel.
- Masírovaním chodidiel uvoľníte akupunktúrnymi bodmi celé telo.
- Vyberateľné a umývateľné látkové vnútro je ľahko čistiteľné a preto bude vaše zariadenie jednoduché udržiavať čisté.
- Elektrické napájanie je ľahko skladovateľné, čo prinesie pohodlie do vášho života.

Prevádzkovanie

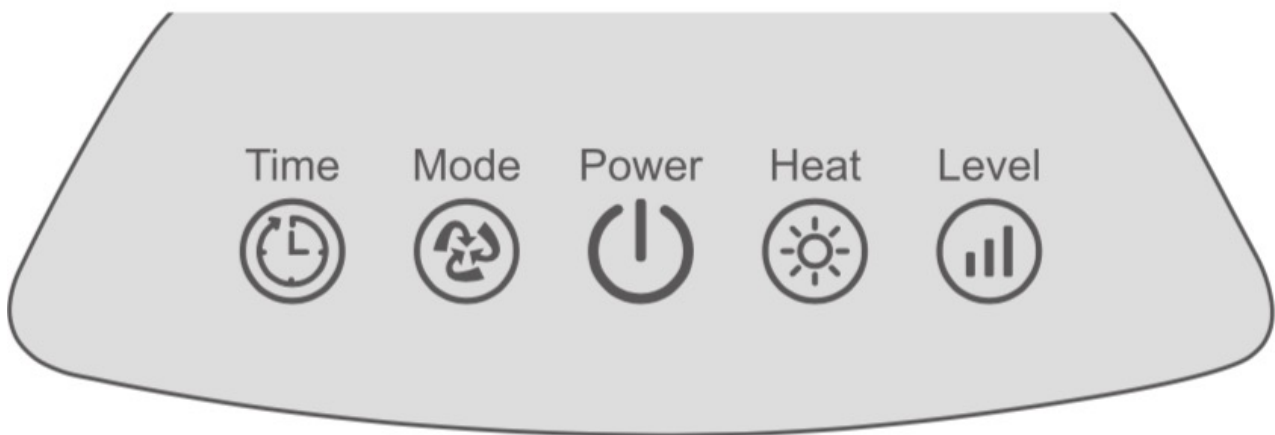

Time: Nastavenie času masáže. Stláčaním tlačidla sa na obrazovke zobrazuje trvanie masáže v minútach. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj sám vypne.

Mode (Režim): 3 režimy. Režim 1 (miesenie v smere hodinových ručičiek), Režim 2 (miesenie proti smeru hodinových ručičiek) a Režim 3 (vzduchová kompresia).

Power: Tlačidlo na zapnutie a vypnutie zariadenia.

Heat: Ak chcete, aby zariadenie hrialo, stlačte tlačidlo jedenkrát. Ak je funkcia spustená, bude indikátor na zariadení svietiť.

Level: Nastavenie intenzity masáže - P1, P2, P3, P4, P5. Stláčaním tlačidla zvyšujete intenzitu masáže. Po zatlačení tlačidla 5-krát sa intenzita masáže znova dostane na P1 - najslabšiu intenzitu.

1. Odbalte zariadenie, aj napájací kábel a pripojte ho do zásuvky 100-240V/50-60Hz. Svetlo na obrazovke zariadenia sa rozsvieti, t.j. že zariadenie ste správne pripojili k el. sieti.
2. Zatlačíte tlačidlo Power jedenkrát na zapnutie zariadenia. Zariadenie sa automaticky spustí v Mode/Režime 1 s najnižšou intenzitou masáže (P1).
3. Pokiaľ je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla level si nastavíte intezitu masáže. P1 najslabšia intenzita masáže až po P5 najsilnejšia intezita masáže. Opakovaným stláčaním tlačidla sa vrátite na najslabšiu intenzitu.
4. Ak je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla mode si môžete nastaviť režim masáže (tieto režimy sú popísané v tomto návode vyššie).
5. Stlačením tlačidla Power vypnete zariadenie a tiež všetky jeho funkcie.
6. Odpojením napájacieho kábla z elektrickej siete obrazovka na prístroji zhasne.

Vylúčenie zodpovednosti



Varovanie a opatrnosť

a) Opatrnosť pri prevádzke

- Nepoužívajte zariadenie pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo sa necítite dobre.
- Nepoužívajte zariadenie nepretržite viac ako 30 minút.
- Neprikrývajte zariadenie pokiaľ je horúce a ani pri používaní zariadenia.

- Nepoužívajte zariadenie 1 hodinu pred jedlom, alebo po jedle, aby ste sa vyhli nepriaznivým účinkom.
- Ak používate zariadenie pri nízkej teplote v miestnosti, ohrevnú funkciu nepoužívajte ihneď. Odporúča sa zapnúť až pokiaľ sa teplota v miestnosti vyhreje do relatívne teplého stavu.
- Ak premiestňujete zariadenie z prostredia kde je nízka teplota do prostredia s vysokou teplotou, odporúča sa počkať aspoň 1 hodinu a až potom zariadenie používať. Je to preto, že môže vzniknúť elekt. zarosenie (v zariadení sa naakumuluje malé množstvo vody) a to môže viesť k zraneniu.

b) Požiadavky na prostredie

- Nepoužívajte výrobok vo vlhkom alebo prašnom prostredí. Môžete zapríčiniť poškodenie výrobku.
- Nepoužívajte výrobok v prostredí alebo miestnosti, kde je teplota vyššia ako 40°C.
- Neumiestňujte výrobok vonku.
- Neumiestňujte výrobok blízko tepelných zariadení, ako sú ohrievač, sporák, kachle, či na priame slnečné žiarenie.

c) Kontraindikácie

- Ak máte niektorý z nasledujúcich prejavov, či ochorení, prosím konzultujte používanie prístroja s vaším doktorom.
 - Ľudia, ktorí dostávajú lekárske ošetrovanie alebo ak sa necítia dobre.
 - Pacienti, ktorí majú ochorenie srdca, cerebrálnu artériosklerózu, cerebrálnu trombózu.
 - Pacienti so zhubným tumorom.
 - Ženy, ktoré sú tehotné alebo sú v období menštruácie.
 - Ľudia s osteoporózou.
 - Ľudia, ktorí používajú kardiostimulátor alebo majú zavedené medicínske zariadenie.
 - Ľudia s akútnymi chorobami.
 - Maloleté osoby.

d) Upozornenie týkajúce sa elektrického sieťového vypínača

- Nepoužívajte zariadenie a elektrický sieťový vypínač s mokрыmi rukami.
- Nenechávajte zariadenie a elektrický sieťový vypínač v kontakte s tekutinami, ako sú napríklad voda ...



Bezpečnostné upozornenia

Prosíme vás používať zariadenie korektne pre vlastnú bezpečnosť.

- Uistite sa, aby sa tento produkt používal podľa návodu na používanie.
- Po používaní alebo pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Nepoužívajte zariadenie na citlivú pokožku alebo na časti tela, kde je slabá cirkulácia krvi.
- Deťom a ľuďom, ktorí majú psychické alebo mentálne ochorenia sa nepovoľuje používať ohrevnú funkciu. Je možné ju použiť len za dozoru dospeléj a poučenej osoby o používaní zariadenia, prípadne o ochoreniach zverenej osoby. Inak môže nesprávnym používaním nastať nebezpečenstvo.
- Neumiestňujte zariadenie pod vankúš, deku alebo inú prikrývku, inak to môže zapríčiniť elektrický šok, požiar alebo ublíženie v dôsledku prehriatia.
- Neprekrývajte zariadenie počas používania, inak to môže zapríčiniť prehriatie motora a poškodenie.
- Pokiaľ sa necítite dobre počas masáže okamžite zariadenie vypnite.
- Nepoužívajte žiadne iné súčasti, či prídavné zariadenia... ktoré nie sú odporúčané našou spoločnosťou.
- Nevkladajte a nehádzajte žiadne objekty do štrbín a medzier výrobku.

- Ak chcete prerušiť elektrický prúd do zariadenia, najskôr vypnite všetky funkcie zariadenia a potom odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Tento výrobok nemôže slúžiť na samoliečbu alebo samodiagnostiku. Ak potrebujete diagnózu alebo liečbu, musíte navštíviť doktora a konzultovať to s ním.
- Tento produkt nemôžete používať ak nastanú nasledovné podmienky: ak je napájací kábel, alebo napájacia koncovka do elektrickej siete poškodená. Ak sa zariadenie pri používaní správa abnormálne. Ak vám zariadenie spadlo do vody alebo spadlo na zem. V daných prípadoch je potrebné navštíviť autorizovaný servis, ktorý prevedie inšpekciu zariadenia, prípadne potrebnú opravu.

Skladovanie a údržba

a) Skladovanie

- Ak je zariadenie dlhšiu dobu nečinné, prosíme vás, vložte zariadenie do krabice a umiestnite na bezpečné a suché miesto.
- Nepoužívajte napájací kábel na zavesenie zariadenia.
- Vyhnite sa poškrabaniu povrchu zariadenia s ostrými predmetmi.
- Neumiestňujte zariadenie na priame slnečné žiarenie alebo do miestností, kde je vysoká teplota.

b) Čistenie

- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je raidne vypnuté a napájací kábel je vytiahnutý z elektrickej siete.
- Prosíme Vás, na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú handričku.
- Nepoužívajte korozívne čistiace látky, ako sú benzény, riedidlá, atď. na čistenie zariadenia.

c) Údržba

- Držte zariadenie čisté a mimo miest, kde je vysoká vlhkosť.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, použite kryt proti prachu (prosíme zakúpte si ho sami), kryt zabráni napadaniu prachu do zariadenia.

Riešenie problémov

Pokiaľ ste sa stretli s jedným z nasledovných problémov pri používaní tohto produktu, prezrite si dôkladne nasledovné možné príčiny a následné riešenie daného problému. Ak produkt stále vykazuje chybu, kontaktujte nás na inšpekciu a opravu zariadenia.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	1. Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete. 2. Zariadenie nie je v režime chodu.	1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. 2. Stlačte tlačidlo Power.
Zariadenie zrazu prestalo fungovať.	1. Zariadenie nie je dobre pripojené k elektrickej sieti. 2. Zariadenie pracovalo dlhšie ako 30 minút. 3. Pracovný čas zariadenia je príliš dlhý a zariadenie sa automaticky vyplo v dôsledku prehriatia. 4. Príliš veľký tlak na podložku.	1. Uistite sa, že je zariadenie dobre pripojené k elektrickej sieti. 2. Znovu stlačte tlačidlo Power. 3. Znovu stlačte tlačidlo Power po vychladnutí zariadenia na bežnú teplotu. 4. Znovu stlačte tlačidlo Power.

ZÁRUKA

Záruka na tovar je 2 roky od dátumu predaja. Ak produkt zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo výrobnnej chyby, Hi5 opraví alebo produkt vymení či poskytne potrebný poškodený komponent bez poplatku. Pre právnické osoby a podnikateľov tieto záručné podmienky platia 1 rok od dátumu predaja.

Táto záruka vylučuje:

- Poškodenie zapríčinené nehodou, zlým zaobchádzaním, zneužívaním alebo prepravou.
- Ak je zariadenie podrobené neautorizovanej oprave.
- Nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Poškodenie presahujúce cenu tohto výrobku.
- Poškodenie a zhoršenie stavu produktu v dôsledku abnormálneho skladovania alebo nedodržania podmienok pre pracovné prostredie zariadenia (vetranie, čistenie,...)
- Poškodenie a zlyhanie po uplynutí záručnej doby.

Predajca:

REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.

IČO: 50699431, DIČ: 2120430026,

IČ DPH: SK2120430026

