

Návod na masážnu pištoľ Zeus



Ďakujeme Vám za zakúpenie vibračno masážnej pištole Zeus. Pred používaním si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a dodržujte pokyny pre obsluhu.

Inštrukcie na používanie:

1. Zapnutie / vypnutie zariadenia: Pri vypnutom: dlhým zatlačným tlačidla na zadnej strane sa zariadenie spustí. Pri zapnutom zariadení: dlhým zatlačením tlačidla na zadnej strane sa zariadenie vypne.
2. Krátkym zatlačným tlačidla na zadnej strane (rovnakým ako pre zapnutie / vypnutie) zariadenie mení rýchlosť masáže.
3. Vybratie / výmena vibračnej hlavice: vibračnú hlavicu vymieňajte len pri vypnutom zariadení. Pevne uchyťte hlavicu a vytiahnite z prednej časti zariadenia.
4. Vloženie vibračnej hlavice: vibračnú hlavicu vymieňajte len pri vypnutom zariadení. Pevne uchyťte hlavicu a vsuňte do prednej časti zariadenia.
5. Prosím nabíjajte len s 5V nabíjacím zariadením.
6. Pri prvom nabíjaní nabíjajte zariadenie 3 hodiny. Nabíjací kábel napojte do 5V nabíjacieho adaptéra.
7. Pri nabíjaní LED svetlá zobrazujú úroveň nabitia batérie. Pri práci so zariadením LED svetlá zobrazujú úroveň rýchlosti vibrácií.
8. Indikátor LED osvetlenia:
 - (a) pri nabíjaní zariadenia 6 LED svetiel bliká
 - (b) pri plne nabitom zariadení 6 LED svetiel svieti
 - (c) pri zapnutom zariadení dané rozsvietené LED svetlo indikuje rýchlosť vibrácií.

Bezpečnostné inštrukcie: Aby sa znížilo riziko elektrického šoku, požiaru a zraneniu osôb používajte tento produkt podľa nasledovných inštrukcií.

- Toto zariadenie môžu používať iba dospelé osoby.
- Zariadenie sa môže používať iba na suchú a čistú pokožku tela a nemôže byť používané cez oblečenie. Pri používaní používajte primeraný tlak na pokožku a pohybujte so zariadením opatrne pri masáži. Čas trvania na každú časť tela je približne 60 sekúnd.
- Používajte toto zariadenie iba na mäkké tkanivá ľudského tela, ktoré nie sú poranené, alebo inak poškodené. Zariadenie používajte tak, aby vám nespôsobovalo bolesť, alebo diskomfort. Zariadenie sa nesmie používať na hlavu, alebo na iné tvrdé časti ľudského tela ako sú časti kosti a iné.
- Používajte iba originálne vibračné hlavice pre najlepší výsledok.
- Modriny môžu byť zapríčinené či už pod miernym tlakom, alebo normálnym tlakom. Prosím vždy skontrolujte oblasť tela, na ktorej idete previesť fyzioterapiu.
- Prestaňte zariadenie ihneď používať ak pociťuje osoba, ktorej je podávaná terapia masážnou pištoľou diskomfort, alebo bolesť.
- Prsty, vlasy alebo iné časti tela držte ďalej od hriadeľa a zadnej časti vibračnej hlavy, pretože by sa mohli priškripiť a spôsobiť poranenie.
- Neprekrývajte ani neumiestňujte žiadne veci na prieduch zariadenia. Inak môže prísť k prehriatiu a poškodeniu zariadenia.
- Neponárajte zariadenie do vody ani nedovoľte vode a ani inej kvapaline vniknúť do zariadenia.

- Nabíjajte zariadenie iba s adaptérom (nabíjačkou) na 5VDC.
- Dôkladne skontrolujte zariadenie a batériu pred každým použitím.
- Neupravujte ani nič nemeňte na zariadení. Inak môže prísť k zraneniu osôb, alebo k poškodeniu zariadenia.
- Nikdy nenechávajte zariadenie nabíjať a ani spustené bez dozoru.

Indikácie a kontraindikácie:

- Hĺbkové preniknutie zariadenia môže znížiť bolesť z bodových vrtnutí, svalových kŕčov, neuralgie a iných muskuloskeletálnych porúch v krátkom časovom období. Takmer všetky ochorenia mäkkých tkanív sú zapríčinené traumou, nadmerné používanie svalov (presilenie), zlé držanie tela, alebo zjazvené tkanivo môžu byť vyliečené týmto zariadením. Vyhnite sa nadmernému stresu pri používaní zariadenia, pretože to predlžuje fyzioterapiu. Tiež sa vyhnite sensitívnym oblastiam ako sú tvár, hlava, krčným stavcom, pohlavným orgánom... Prestaňte zariadenie používať ak je zápal, opuch, alebo zvýšená bolesť.
- Prebiehajúci výskum predpokladá, že kombinácia vibrácií a fyzioterapie sú veľmi nápomocné a odporúčajú sa pri rôznych fyzioterapeutických programoch. Toto však musí byť prekonzultované s vaším fyzioterapeutom, alebo doktorom.

Indikácie:

- Bolesť a kŕče v dôsledku svalového zranenia, vyvrtnutia a natiahnutia.
- Pomôžte prúdeniu edémovej tekutiny v opuchnutej oblasti.
- Uvoľnite zhrubnuté spojivové tkanivá a fascií.
- Znižuje nahromadenie kyseliny vo svaloch.
- Eliminuje sa svalová únava.
- Zvyšuje kĺbovú pohyblivosť.

Kontraindikácie:

- Nepoužívajte pri aneurizme, krvácaní, a pokiaľ beriete lieky na riedenie krvi.
- Nepoužívajte pri ochorení srdca, pri používaní kardiostimulátora strojčeka na srdce...
- Nepoužívajte v tehotenstve, a pri zistení ochorenia rakoviny.
- Nepoužívajte pri vnútornej kĺbovej fixácii. A najmenej 90 dní po vnútornej kĺbovej fixácii a najmenej 3 palce od vnútornej kĺbovej fixácii.
- Nepoužívajte zariadenie na citlivé miesta ako sú tvár, hlava, krčné stavce, pohlavné orgány, chrbtica...
- Nepoužívajte na miestach kde sú časti tela málo prekrvené svalmi ako je priehlavok chodidla, zadná časť hlavy ...

Parametre produktu:


Model: G325

Menovité napätie: DC7,4V


Menovitý výkon: 25 W

Li-on Batéria: 1800mAh

Spôsob ako vymeniť nadstavec:

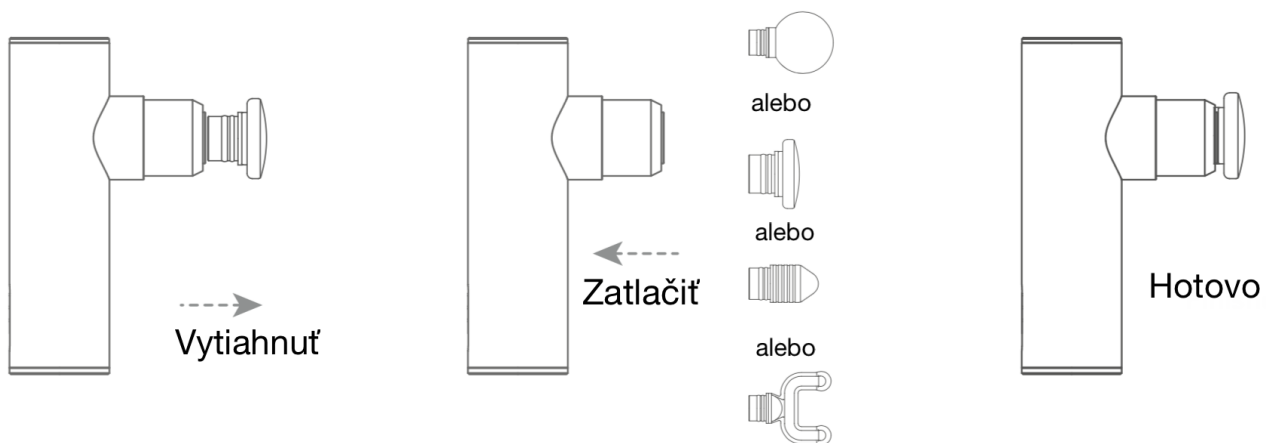


Masážne nadstavce:

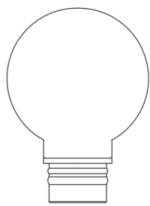

Gul'atý nadstavec

Vhodný na všetky časti tela, guľa je vyrobená z mäkkej odolnej peny

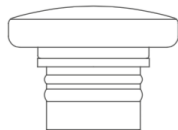


Plochý nadstavec

Vhodný na masáž väčších svalov (chrbát, stehná...)



Projektiový nadstavec

Vhodný na ťažko dostupné svaly

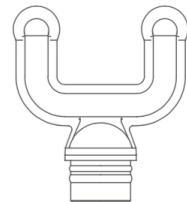

Vidlicový nadstavec

Vhodný na masáž okolo chrbtice a ostatných citlivejších svalov

Likvidácia batérie:

Pred vyhodením zariadenia, prosím použite vhodný nástroj na otvorenie kovovej časti tlačidla a potom vyberte zostavu elektronickej dosky, aby ste mohli vybrať batériu vo vnútri a zlikvidovať ju.


- Batéria musí byť vybrať a zlikvidovaná pred vyhodením zariadenia.
- Pokiaľ odstraňujete batériu zo zariadenia, uistite sa, že zariadenie je vypnuté.
- Batériu je potrebné zlikvidovať podľa klasifikácie odpadu na klasifikáciu nebezpečného odpadu. Postupujte podľa pravidiel štátu, v ktorom batériu likvidujete.

Záruka:

1. Výrobok má záruku 2 roky od zakúpenia.
2. Záruka sa vzťahuje na poškodenie výrobku pri bežnom používaní.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. Poškodenie pri preprave, nehode a páde.
2. Pokiaľ je zariadenie opravované v neautorizovanom servise.
3. Pri nesprávnom používaní zariadenia.
4. Pokiaľ zariadenie nie je skladované a používané vo vhodnom prostredí a vhodných podmienkach.
5. Pokiaľ je zariadenie používané nepoučenými užívateľmi a osobami, ktoré majú zakázané používať výrobok (deti, mentálne nespôsobilé osoby).

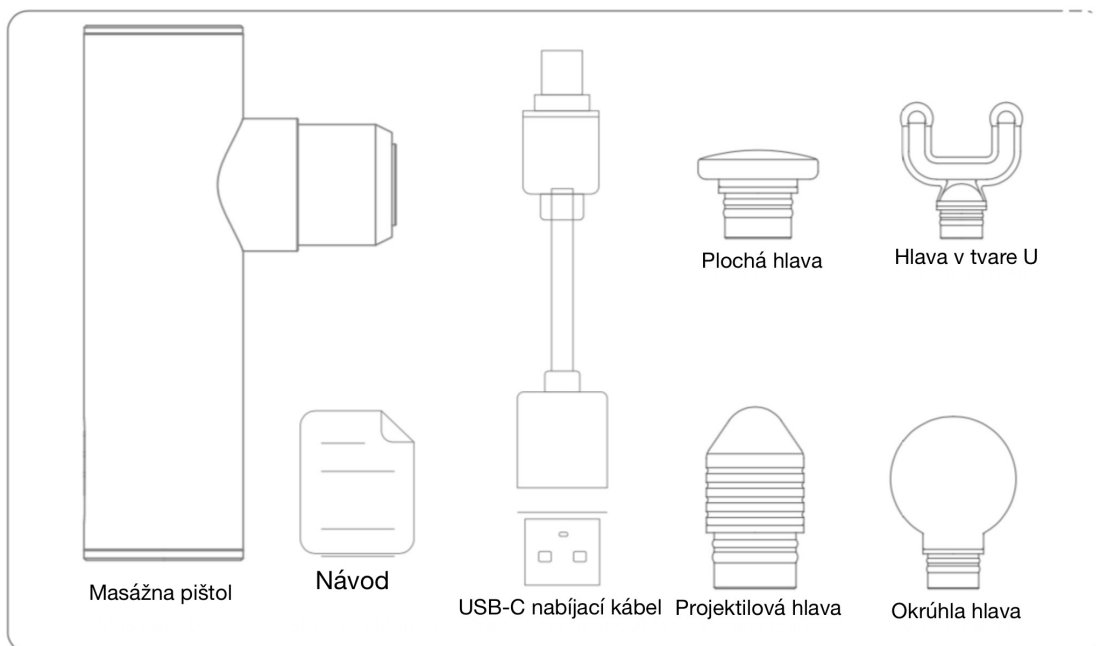Balenie obsahuje:

Predajca: REVIXA s.r.o.

Golianova 66, Nitra

IČO: 50699431, DIČ: 2120430026,

IČ DPH: SK2120430026

