

Pro Masážna pištoľ Mini Cooper Hi5

Návod na použitie

Parametre výrobku

Názov výrobku: Hi5 vybračno-masážne zariadenie

Model: Cooper

Menovitý výkon: 16W

Maximálny výkon: 60W

Menovité napätie: 8V

Menovitý prúd: 2A

Menovitá frekvencia: 50/60Hz

Výstupné napätie: 5V

Výstupný prúd: 2A

Váha výrobku: 390g


Maximálna rýchlosť: 3200r/min

Kapacita batérie: 2000mAh

Veľkosť výrobku: 78x38x130mm
(masážna hlavica je vylúčená z rozmeru)


(Podpora energie: nabíjateľná líthiová batéria)

Vymeniteľná masážna
hlavica

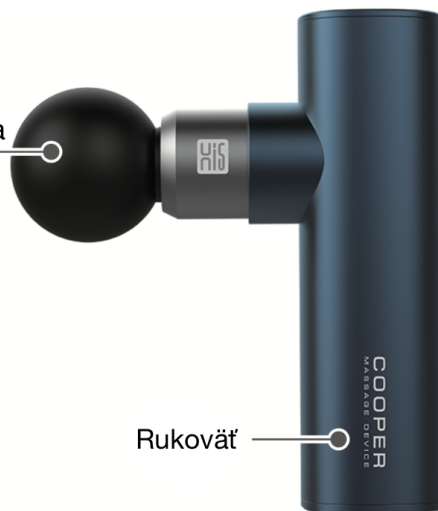


Rukoväť

Masážne nadstavce

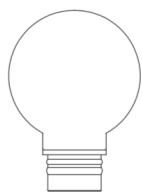

Guliatý nadstavec

Vhodný na všetky časti tela, guľa je vyrobená z mäkkej odolnej peny

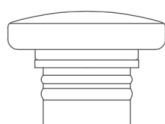


Plochý nadstavec

Vhodný na masáž väčších svalov (chrbát, stehná...)



Projektiový nadstavec


Vhodný na ťažko dostupné svaly

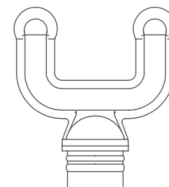

Vidlicový nadstavec

Vhodný na masáž okolo chrbtice a ostatných citlivejších svalov

Spôsob ako vymeniť nastavtec:

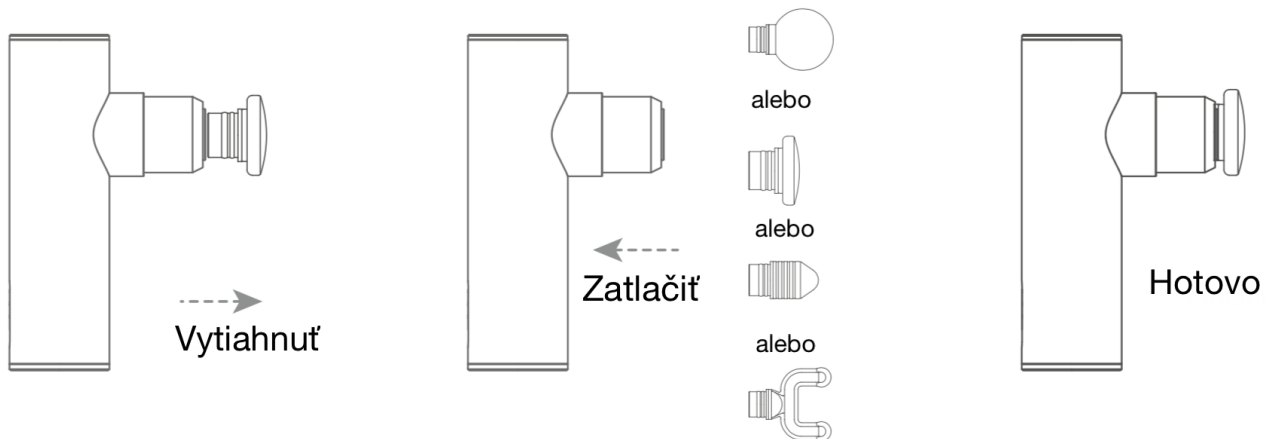

Zapnutie / vypnutie zariadenia:

- Zatlačte tlačidlo zapnúť / vypnúť a držte ho 3 sekundy, zariadenia sa zapne.
- Zatlačte tlačidlo zapnúť / vypnúť a držte ho 3 sekundy, zariadenia sa vypne.

Rýchlosť vibrácií zariadenia:

- Úroveň 1 je prednastavená po zapnutí zariadenia.
- Každé zatlačenie tlačidla zvyšuje intenzitu vibrácií.
- Ak dosiahnete úroveň 3 a zatlačíte tlačidlo znovu, zariadenie prejde znovu do úrovne 1.

zapnutie
/
vypnutie



Upozornenie:

Prístroj je vybavený 10-minútovým pracovným časovačom (časovačom), aby nedošlo k poškodeniu svalu a fascie spôsobenému nadmernou masážou.

Indikátor a blikanie:

- Rýchlosť vibrácií ukazuje svetelný indikátor.
- Úroveň 1 je prednastavená po zapnutí zariadenia.
- Rýchlosť sa bude meniť každým krátkym stlačením postupne a cyklicky.

3 úrovne rýchlosti vibrácií.

Úroveň 1: 1800r/min

Úroveň 2: 2600r/min


Úroveň 3: 3200r/min

Indikátor úrovne
vibrácií



- Červené svetlo svieti počas nábíjania zariadenia.
- Biele svetlo svieti pokiaľ je zariadenie nabité.


Indikátor nábíjania

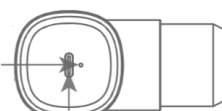

Port na nábíjanie

Nabíjanie:

- Pred prvým použitím zariadenie nabite do plna.
- Červené svetlo svieti počas nabíjania zariadenia, biele svetlo svieti pokiaľ je zariadenie plne nabité.
- Nabíjanie zariadenia trvá asi 3 hodiny, pracovný čas zariadenia je asi 8 hodín pri maximálnej úrovni vibrácií.
- Ak má batéria kapacitu 10%, indikátor nabíjania začne blikať na červeno a je potrebné zariadenie čo najskôr nabiť.
- Pre vašu bezpečnosť je zakázané používať zariadenie počas nabíjania.
- Pre dlhú životnosť zariadenia, nabíjajte zariadenie hneď po indikovaní slabšej batérie.

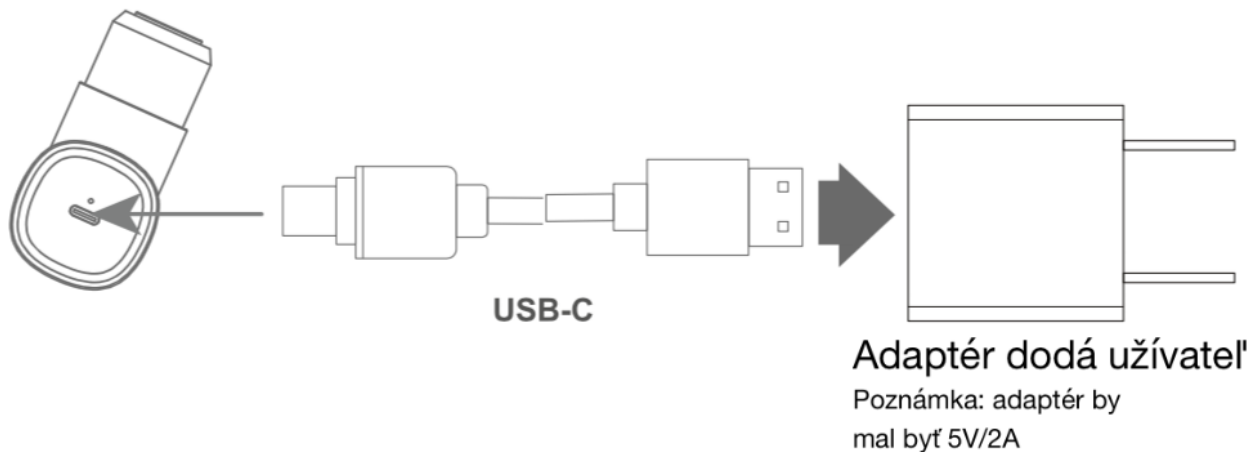

Kontraindikácie:

Prosím nepoužívajte toto zariadenie bez predchádzajúceho získania súhlasu od svojho lekára, ak platí niektorá z nasledujúcich situácií:

- Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, neuropatia alebo poškodenie sietnice, používanie kardiostimulátorov, nedávny chirurgický zákrok, epilepsia a migrény, herniácia platničky, spondylolistéza alebo spondylóza, nedávne výmeny kĺbov alebo vnútromaternicové teliesko, kovové kolíky alebo platničky alebo ak máte akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie.
- Mentálne postihnuté osoby a deti by mali byť pri používaní vibračného zariadenia s dozorom dospelšej osoby. Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenie, ale odporúčame najskôr konzultovať to s lekárom.
- Prebieha výskum účinkov vibračných cvičení na špecifické zdravotné poruchy. To pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu kontraindikácií, ako sú uvedené vyššie.
- Praktické skúsenosti ukazujú, že integrácia vibračných cvičení do liečebného plánu je v mnohých prípadoch odporúčaná. Musí sa to robiť na odporúčanie a v sprievode lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.

Varovanie / výstraha:

- Neponárajte zariadenie do vody, držte zariadenie od tekutín a horúcich nápojov, nabíjací port držte od prachu a iných nečistôt.
- Nepovolujte skrutky a nerozoberajte zariadenie.

- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako jednu hodinu. Po používaní zariadenia musí mať zariadenie prestávku 30 minút.
- Po nabíjaní alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Používať ho smú len dospelé osoby. Zákaz používať zariadenie pokiaľ ste zranený. Použitie konzultujte so svojim lekárom.

Bezpečnostné inštrukcie:

Nebezpečenstvo: Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb, musí byť toto zariadenie používané podľa nasledovných inštrukcií.

- Zariadenie je určené iba pre dospelé osoby.
- Prosím držte toto zariadenie od detí a neskladujte zariadenie na miesta kde majú k nemu prístup deti.
- Toto zariadenie nie je jedlo, nekladajte hlavice zariadenie ani iné čati do úst.
- Používajte toto zariadenie iba na mäkké tkanivo podľa potreby. Nepoužívajte toto zariadenie na tieto časti tela: hlava, kosti a srdce.
- Používajte zariadenie iba na čisté suché oblečenie, jemne tlačte na telo a premusírujte jednotlivé časti tela. Najviac 60 sek. na jednom mieste.
- Nepoužívajte toto zariadenie na tieto časti tela: pohlavné orgány, tvár, oči, zranenia po operácií, žiadne infekčné časti tela, infekčnú alebo poranenú pokožku a zranené kosti a kĺby.
- V prípade, že cítite pri používaní zariadenia diskomfort, alebo bolesť, prestaňte zariadenie okamžite používať.
- Používajte iba hlavice Hi5 priložené k zariadeniu.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenia ovládania alebo aplikovaného tlaku. Kontrolujte masírované miesta pravidelne a v prípade, že sa začnú objavovať modriny alebo bolesti, prestaňte zariadenie používať.
- Držte prsty, vlasy alebo iné časti tela preč od hriadeľa a zadná strany nadstavca hlavy, pretože môže dôjsť k privretiu a zraneniu.
- Neumiestňujte žiadne predmety na miesta zariadenia kde sú diery ventilácie.
- Opatrne skontrolujte batériu a zariadenie pred každým použitím.
- Nemanipulujte zariadením zakázaným spôsobom ani neupravujte zariadenie.
- Neodkladajte vibračnú pištoľ v pracujúcom stave ani nenabíjajte vibračnú pištoľ bez dozoru.

Likvidácia batérie:

Pred vyhodením zariadenia, prosím použite vhodný nástroj na otvorenie kovovej časti tlačidla a potom vyberte zostavu elektronickej dosky, aby ste mohli vybrať batériu vo vnútri a zlikvidovať ju.

- Batéria musí byť vybrať a zlikvidovaná pred vyhodením zariadenia.
- Pokiaľ odstraňujete batériu zo zariadenia uistite sa, že zariadenie je vypnuté.
- Batériu je potrebné zlikvidovať podľa klasifikácie odpadu na klasifikáciu nebezpečného odpadu. Postupujte podľa pravidiel štátu v ktorom batériu likvidujete.


Záruka:

1. Výrobok má záruku 2 roky od zakúpenia výrobku.
2. Záruka sa vzťahuje na poškodenie výrobku pri bežnom používaní.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. Poškodenie pri preprave, nehode a páde
2. Pokiaľ je zariadenie opravované v neautorizovanom servise
3. Pri nesprávnom používaní zariadenia
4. Pokiaľ zariadenie nie je skladované a používané vo vhodnom prostredí a vhodných podmienkach
5. Pokiaľ je zariadenie používané nepoučenými užívateľmi a osobami, ktoré majú zakázané používať výrobok (deti, mentálne nespôsobilé osoby)

Balenie obsahuje:

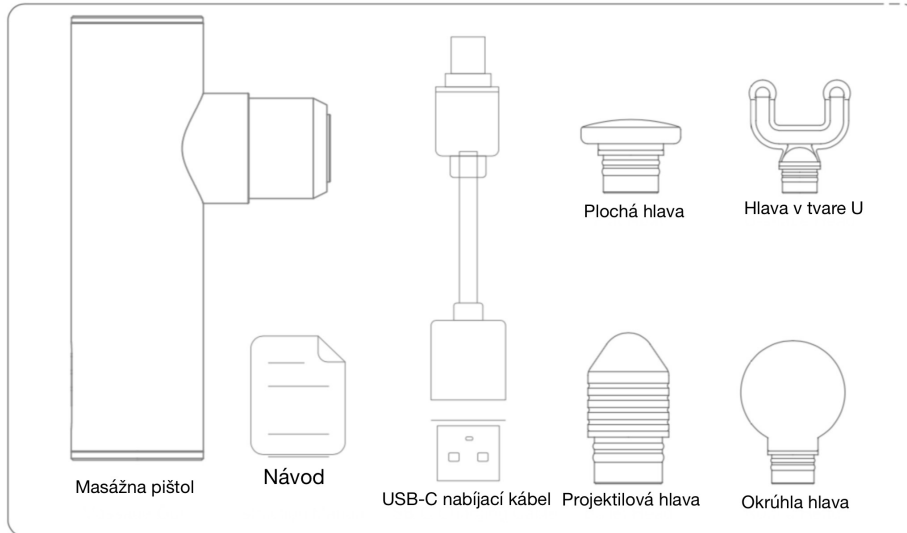

Predajca: REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026,
IČ DPH: SK2120430026

